


品番	標準価格	掲載頁
単品系		
フレキシマ やわ凸		
ロールアップ		
4622716G	¥7,500	8
4622717G	"	"
4621716G	"	"
ウロ		
4641715G	¥9,000	8
フレキシマ アクティブ		
ロールアップ		
4621215G	¥5,900	10
4621115G	"	"
4621125G	"	"
4621130G	"	"
4621135G	"	"
4621140G	"	"
4620115G	"	"
4621380G	"	"
4620380G	"	"
フレキシマ		
ロールアップ		
42815G	¥5,200	"
42715G	"	"
42725G	"	"
42730G	"	"
42735G	"	"
ロールアップコンベックス		
42817G	¥9,500	12
42818G	"	"
42718G	"	"
42726G	"	"
42731G	"	"
ハイフロー		
42971G	¥8,600	12

品番	標準価格	掲載頁
フローコレクター		
039901G	¥5,900	12
ウロシルク		
044913G	¥8,300	13
ウロシルクコンベックス		
44915G	¥12,800	13
44917G	"	"
44920G	"	"
44922G	"	"
密閉型		
044115G	¥3,900	13
プロキシマ プラス		
開放型		
54510G	¥2,700	14
54410G	"	"
密閉型		
54110G	¥6,600	14
54010G	"	"
二品系		
フレキシマ 3S		
ベースプレート フラット		
936415G	¥4,500	17
936425G	"	"
936515G	"	"
936535G	"	"
936615G	"	"
936815G	"	"
ベースプレート コンベックス		
937415G	¥5,500	17
937425G	"	"
937515G	"	"
937530G	"	"
937615G	"	"

品番	標準価格	掲載頁
ロールアップパウチ		
932545G	¥4,900	18
932555G	"	"
932565G	"	"
932580G	"	"
932445G	"	"
932455G	"	"
932465G	"	"
クローズドパウチ		
931555G	¥4,000	18
931565G	"	"
931455G	"	"
931465G	"	"
ウロパウチ		
934145G	¥6,700	18
934155G	"	"
934165G	"	"
アクセサリ		
ストーマケアベルト		
5028G	¥1,000	18
オストハイジーン消臭潤滑剤		
SRY101	¥2,500	19

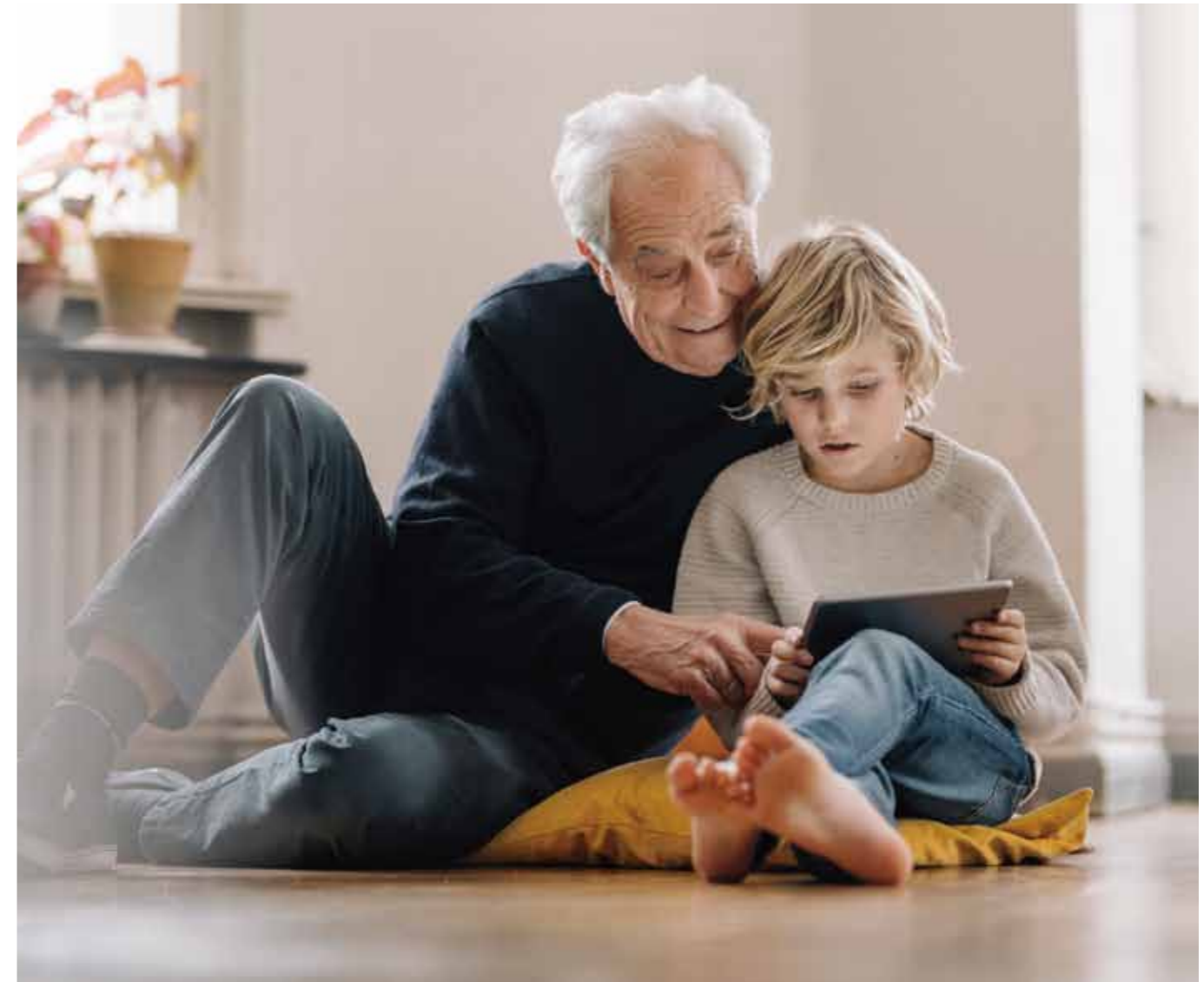

STOMA CARE PRODUCTS

ビー・ブラウン ストーマケア製品総合カタログ

YOUR NEEDS, OUR PRIORITIES

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
 カスタマーサービスセンター：☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)
 www.bb Braun.jp

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
 ※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

快適なストーマライフのために

オストメイトの皆さまにとって、より快適で自由な日々を実現することが、わたしたちのストーマ研究の目的です。

快適なストーマライフのためには、忙しい日常生活の中でも簡単に装着ができ、使いやすく安全でシンプルな、そして目立たない装具が求められています。

ビー・ブラウン社（ドイツ）のストーマケアブランドは40年以上にわたり、

ストーマ装具、イリゲーション、アクセサリなど、

幅広い製品の開発に積極的に関わり、

オストメイトの皆さまはもとより、医療従事者のために、

よりシンプルで使いやすい製品を提供し続けています。

C O N T E N T S

皮膚保護剤	3
皮膚保護剤の特長	3
皮膚保護剤の主成分	4
皮膚保護剤の種類	4
アイコンの説明	5
■ 単品系装具	
フレキシマ やわ凸	7
ロールアップ	8
ウロ	8
フレキシマ アクティブ	9
ロールアップ	10
フレキシマ	11
ロールアップ	12
ロールアップコンベックス	12
ハイフロー	12
フローコレクター	12
ウロシルク	13
ウロシルクコンベックス	13
密閉型	13
プロキシマ プラス	14
開放型	14
密閉型	14
■ 二品系装具	
フレキシマ 3S	15
ベースプレート フラット	17
ベースプレート コンベックス	17
ロールアップパウチ	18
クローズドパウチ	18
ウロパウチ	18
■ アクセサリ	
ストーマケアベルト	11,18
オストハイジーン	19
使用方法	21

皮膚保護剤の特長



フラワーシェイプ

5つの花びら状の皮膚保護剤が腹部の曲面にフィットします

小さな皮膚保護剤

貼付面積が小さく肌への違和感を軽減します


高い初期粘着力

初期粘着力が高く貼付直後の漏れを防止します

優れた柔軟性

柔らかい皮膚保護剤が様々な動きに追従します

皮膚保護剤は、用途により成分の配合比率を変えているため、製品ごとに色の違いがございます。

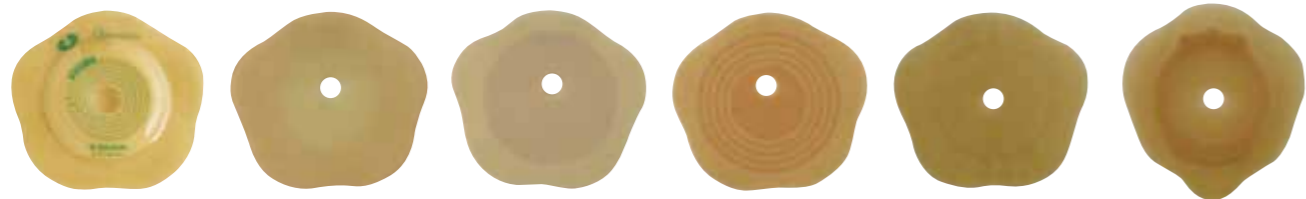

フレキシマ やわ凸 ロールアップ フレキシマ アクティブ ロールアップ フレキシマ ロールアップ フレキシマ ハイフロー フレキシマ ウロシルク フレキシマ3S ベースプレートフラット

皮膚保護剤の主成分

CPb 溶解タイプ	親水性ポリマー	カルボキシメチルセルロース、 ペクチン(柑橘植物由来)、ゼラチン(豚由来)
	疎水性ポリマー	ポリイソブチレン (PIB)
CPs 膨潤タイプ	親水性ポリマー	カルボキシメチルセルロース、 ペクチン(柑橘植物由来)、ゼラチン(豚由来)
	疎水性ポリマー	スチレン・イソプレン・スチレン (SIS)

※JSSCR分類

皮膚保護剤の種類

支持体	分類	CPb (溶解タイプ)	CPs (膨潤タイプ)
	フィルム	フレキシマ やわ凸 フレキシマ 3S	フレキシマアクティブ
	不織布	フレキシマ プロキシマプラス	支持体の拡大図  アクティブの支持体は、伸び縮みします。細かな凹凸をほどこし、様々な動きにフィットします。

アイコンの説明


貼付期間の目安

貼付期間は、皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状などにより変わります。




フラワーシェイプ

面板の形状がお花の形になっています。

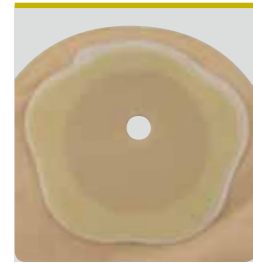

平面

ストーマに高さのある方や、ストーマ周囲にシワやくぼみのない方に使用いただけます。

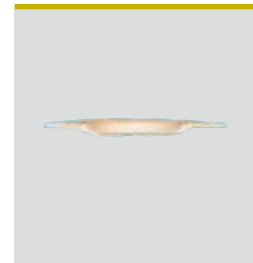

凸面 4mm

なだらかな角度の硬性凸面。ストーマに高さのない方や、ストーマ周囲に浅いシワやくぼみのある方に使用いただけます。




全面

全面皮膚保護剤の面板。お肌の敏感な方にお薦めです。




LKPフィルター

液体遮断性の高いメンブレン膜を採用したガス抜きフィルター。目詰まりやフィルターからの漏れを防止します。

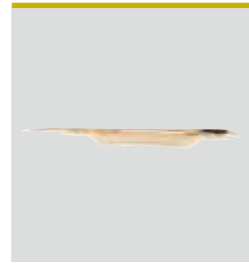


やわ凸 6mm

高さ6mmの低密度ポリエチレン(LDPE)を使用した、なだらかな軟性凸面がやさしい圧をもたらします。

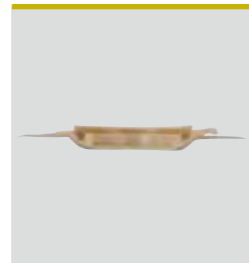

凸面 6mm

シャープな角度の硬性凸面。ストーマに高さのない方や、ストーマ周囲に深いシワやくぼみのある方に使用いただけます。

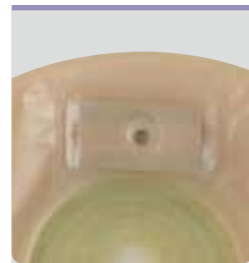

HPフィルター

液体遮断性の高いメンブレン膜を採用したコンパクトなガス抜きフィルター。目詰まりやフィルターからの漏れを防止します。



脱臭フィルター

脱臭効果の高い活性炭フィルターを採用しています。



ロールアップ

下端を巻き上げるだけのクランプレスタイプ。簡単操作で袋の気密性を保ち、排出処理もスムーズに行えます。



クローズ

排出口のない密閉型のストーマ袋です。排泄のたびに交換するため、衛生的に使用いただけます。



クランプ

プラスチック製のクランプが付属しています。



ベルト穴

装具固定用のベルトを使用できる穴がついています。



入浴用シール①

入浴時に使用するシールです。(HPフィルター用)



ハイフロー

キャップ式の排出口。排出口はφ15mmで目詰まりしにくく、キャップの取外しも簡単です。



ソフトクランプ

やわらかいクランプが付属しています。



U 口

服に引っかからないようスムーズ形状の回転コック式で、フラット加工の排出口。尿残りがほとんどなく、キャップをする必要がありません。



逆流防止弁

尿の逆流を防ぐ逆流防止弁がついています。



入浴用シール②

入浴時に使用するシールです。(LKPフィルター、脱臭フィルター用)

すべてにおいて「やさしさ」にこだわったストーマ装具

フレキシマ やわ凸

安心のストーマケアをもたらす
3つのやさしさ

1 やさしい圧

高さ6mmの低密度ポリエチレン (LDPE) を使用した、なだらかなコンベックスリングがやさしい圧をもたらします。



2 肌にやさしい

CPb系*皮膚保護剤が患者さんの肌にやさしいストーマケアを実現します。

* JSSCR分類 主成分: ペクチン、CMC、PIB

3 シンプルで排出しやすい やさしいデザイン

1日に何回も排出作業をすることもあるオストメイトのみなさんに適したシンプルな排出デザイン



3-1 排出しやすい幅7cmの排出口。(ロールアップ)



3-3 ベルトタブが3カ所だから袋の向き調整が可能。



3-2 シンプルな4回巻き上げの排出口。(ロールアップ)



3-4 ひっかかりなく安全、シンプルな回転コック式。(ウロストミー用)



フレキシマ やわ凸 ロールアップ



品番	色	有効径(mm)	袋サイズ	入数	標準価格
4622716G	肌色 (窓付)	フリーカット(15-45)	Midi	10	¥7,500
4622717G			Maxi		
4621716G			Maxi		

非課税

- フラワーシェイプ
- やわ凸 6mm
- 全面
- HPフィルター
- ロールアップ
- ベルト穴
- 入浴用シール①

フレキシマ やわ凸 ウロ



品番	色	有効径(mm)	袋サイズ	入数	標準価格
4641715G	透明	フリーカット(15-35)	Midi	10	¥9,000

非課税

- フラワーシェイプ
- やわ凸 6mm
- 全面
- ウロ
- ベルト穴
- 逆流防止弁

※接続管10本付

ストーマ保有者に上質なQOLを提供する

Flexima® Active

フレキシマ アクティブ



伸縮性と追従性を高めた皮膚保護剤
ビー・ブラウン テック
「B.Braun Tech」を採用

B.Braun Tech

柔軟性と伸縮性で様々な腹壁に追従するスチレン・イソブレン・スチレン (SIS) 配合の皮膚保護剤です。初期粘着力が高く貼付直後の漏れを防止します。さらに装具交換時の糊残りが少なくなっています。


B.Braun Tech



従来の皮膚保護剤



フレキシマ アクティブ ロールアップ

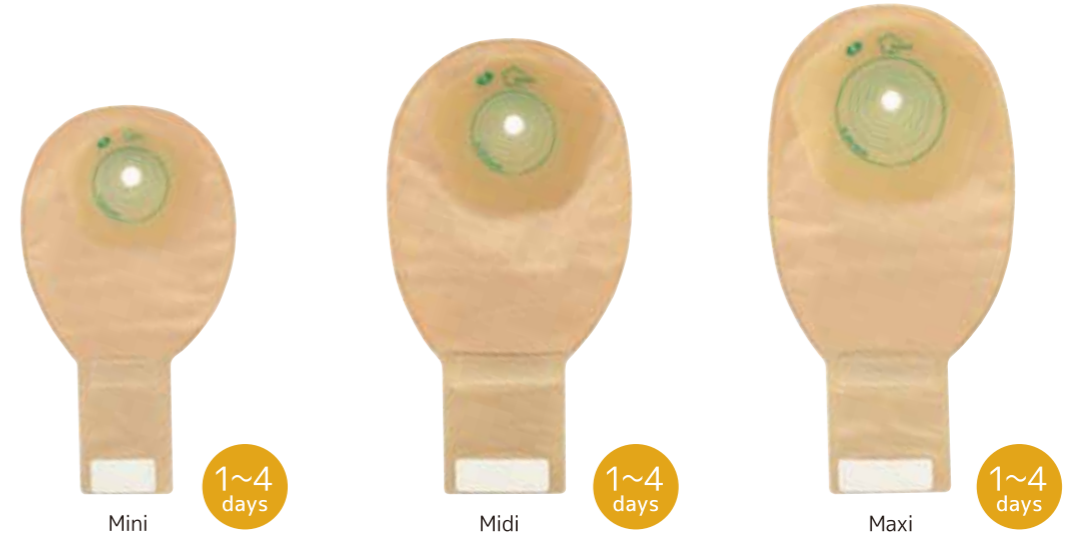

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
4621215G	透明	フリーカット (45まで)	Mini 242×136	10	¥5,900
4621115G	透明	フリーカット (50まで)	Midi 283×154		
4621125G		プレカット (25)			
4621130G		プレカット (30)			
4621135G		プレカット (35)			
4621140G	プレカット (40)				
4620115G	肌色	フリーカット (50まで)	Maxi 304×156	10	¥5,900
4621380G	透明	フリーカット (65まで)			
4620380G	肌色				

フラワーシェイプ
平面
全面
HPフィルター
ロールアップ
入浴用シール①

さまざまなスチームの状態に、使い勝手に選択できる

Flexima®


フレキシマ

優れた柔軟性で様々な動きに追従し、腹部の曲面にフィットします。排出口の種類が豊富なので、スチームの状態やスチーム保有者ご自身で使い勝手の良い製品を選択していただけます。

コンベックスタイプの

3ポジショニングシステム

フレキシマシリーズのコンベックスタイプには、面板両端に3つずつベルト穴が開いており、装具を斜めに貼る場合でもベルト穴を変えることで、ベルトを体に対して水平に装着することができます。ベルト穴のプレートは凸面リングと一体形成されているので高い固定力を発揮します。ベルトは対角にかけての使用をお勧めします。

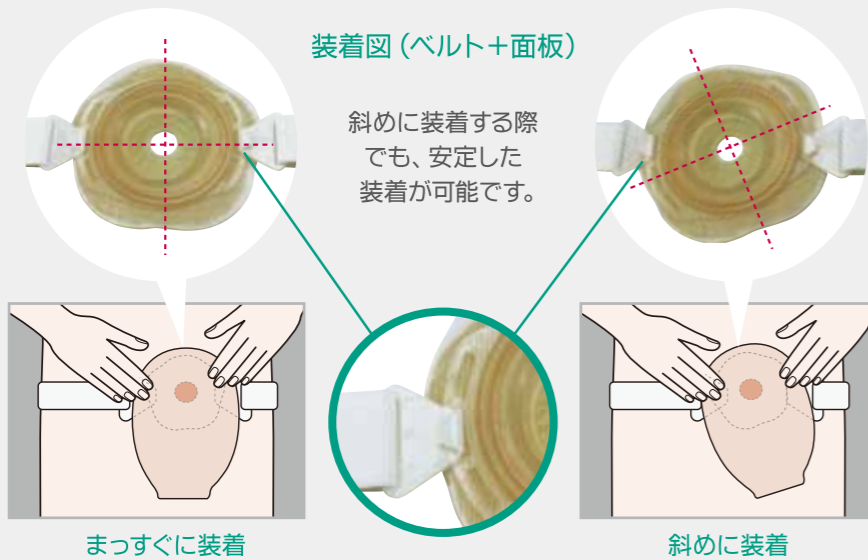

■ベルトのフックを外向きにし、ベルト穴にすべり込ませると、簡単に装着できます。
※ベルトのフックが体の外向きになるよう装着ください。
※写真は撮影のため、商品を加工しています。

スチームケアベルト



品番	サイズ	入数(本)	標準価格
5028G	フリー (110cm)	1	¥1,000

- 面板の固定力・安定感を高めるために使用ください
- ラテックスフリー

フレキシマ ロールアップ



1~3 days

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
42815G	透明	フリーカット (60まで)	283×154	10	¥5,200
42715G	肌色	フリーカット (60まで)			
42725G		プレカット (25)			
42730G		プレカット (30)			
42735G		プレカット (35)			

- フラワーシェイプ
- 平面
- 全面
- HPフィルター
- ロールアップ
- 入浴用シール①

フレキシマ ロールアップコンベックス



1~3 days

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
42817G	透明	フリーカット (35まで)	283×154	10	¥9,500
42818G		フリーカット (45まで)			
42718G	肌色	フリーカット (45まで)			
42726G		プレカット (25)			
42731G		プレカット (30)			

- フラワーシェイプ
- 凸面 4mm
- 全面
- HPフィルター
- ロールアップ
- ベルト穴
- 入浴用シール①

フレキシマ ハイフロー



1~3 days

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
42971G	透明	フリーカット (76まで)	320×150	10	¥8,600

- フラワーシェイプ
- 平面
- 全面
- LKPフィルター
- ハイフロー
- 入浴用シール②

フローコレクター



品番	チューブ径(mm)	容量	入数(枚)	標準価格
039901G	15	2,000ml	5	¥5,900

- フレキシマ ハイフロー専用排液バッグ
- 折れ曲がりにくい蛇管チューブ採用
- チューブ長150cm (30cmごとにカット可能)

フレキシマ ウロシルク



1~3 days

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
044913G	透明	フリーカット (55まで)	244×151	10	¥8,300

非課税

- フラワーシェイプ
- 平面
- 全面
- ウロ
- 逆流防止弁

※接続管10本付

フレキシマ ウロシルクコンベックス



1~3 days

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
44915G	透明	フリーカット (25まで)	260×150	10	¥12,800
44917G		フリーカット (35まで)			
44920G		プレカット (25)			
44922G		プレカット (30)			

非課税

- フラワーシェイプ
- 凸面 4mm
- 全面
- ウロ
- ベルト穴
- 逆流防止弁

※接続管10本付

フレキシマ 密閉型



1~2 days

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
044115G	透明	フリーカット (50まで)	197×149	10	¥3,900

非課税

- フラワーシェイプ
- 平面
- 全面
- 脱臭フィルター
- クローズ
- 入浴用シール®

快適なストーマケアをサポートする

Proxima®+

プロキシマ プラス

シンプルで簡単に装着できる軽くてしなやかな単品系装具です。
快適な使い心地を提供します。

プロキシマ プラス 開放型



1~2 days

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
54510G	透明	フリー (70まで)	295×150	10	¥2,700
54410G	肌色				

非課税

- 平面
- 全面
- 脱臭フィルター
- クランプ

※クランプ1本

クランプ

プロキシマ プラス 密閉型



1~2 days

品番	色	有効径(mm)	袋サイズ(mm)	入数	標準価格
54110G	透明	フリー (70まで)	195×150	30	¥6,600
54010G	肌色				

非課税

- 平面
- 全面
- 脱臭フィルター
- クローズ

シンプルに、ソフトに、そして確実に

Flexima® 3S

フレキシマ スリーエス

「フレキシマ スリーエス」の“3つのS”が、ストーマ保有者の安心の日常生活をサポートします。



Secure

セキュア（安全）な嵌合とストーマ袋の保持力。



Simple

ガイドホールがあり簡単に嵌合できます。

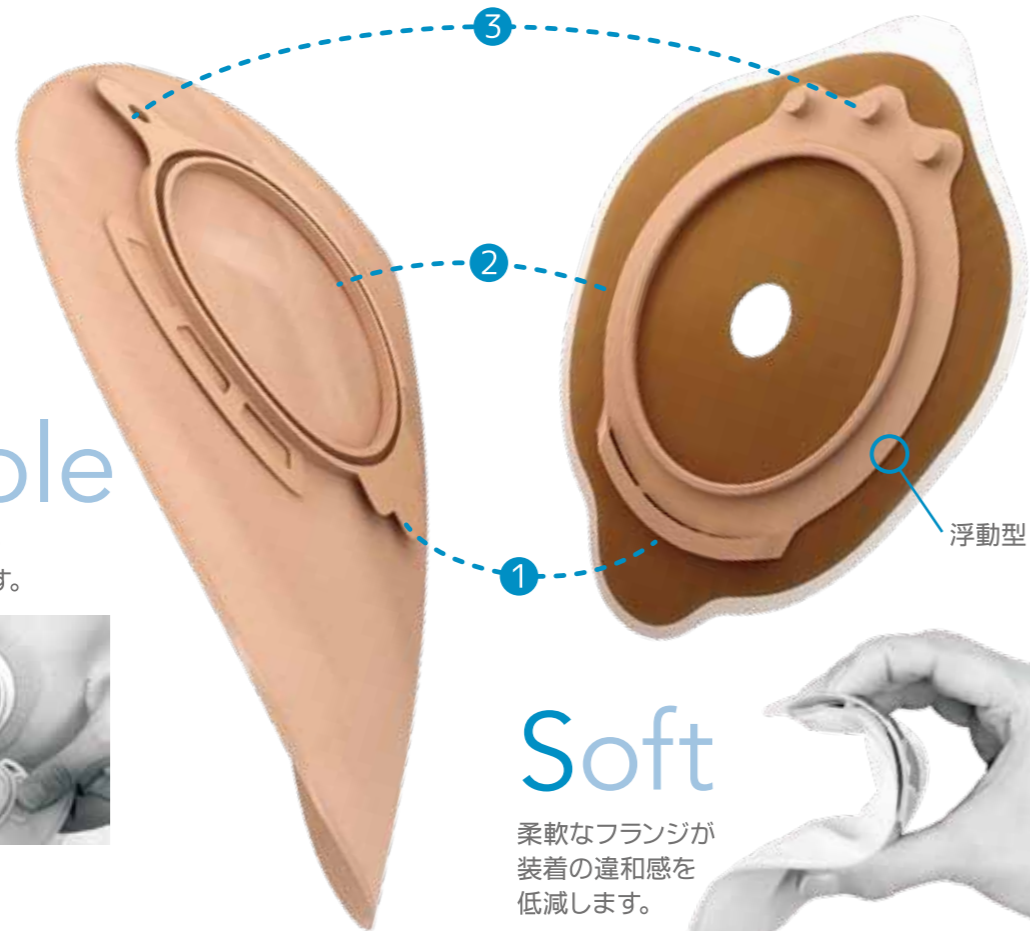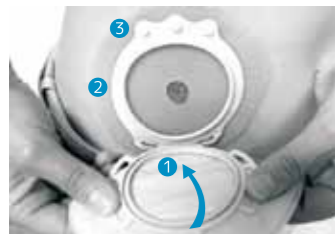


Soft

柔軟なフランジが装着の違和感を低減します。



各種名称

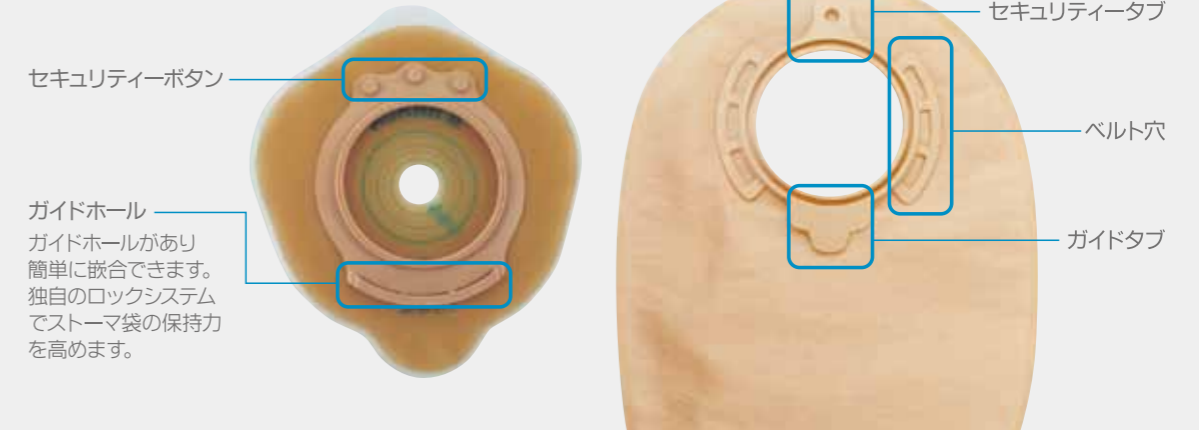


3ポジショニングシステム

ストーマ袋に3つずつベルト穴が開いており、袋を斜めに嵌合する場合でもベルト穴を変えることでベルトを体に対して水平に装着することができます。ベルトは対角にかけての使用をお勧めします。




装着図 (ベルト+袋)

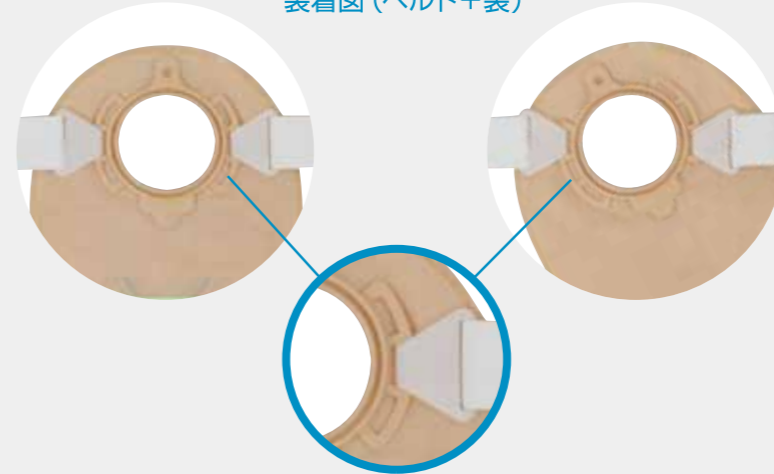

■ベルトのフックを外向きにし、ベルト穴にすべり込ませると、簡単に装着できます。
※ベルトのフックが体の外向きになるよう装着下さい。

嵌合方法

セキュリティボタンを頭側にして面板を腹部に貼付してください。

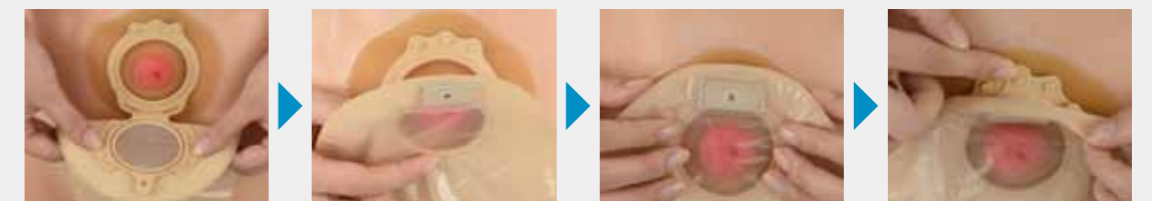


ストーマ袋の下方向にあるガイドタブを面板のガイドホールに差し込みます。
※3つのガイドホールのどれに差し込んで使用いただけます。

ガイドホール部分のリング同士を合わせ留めます。

ガイドホールから頭側に向かって嵌め込んでいきます。

最後に上部のセキュリティボタンを嵌め込みます。

フレキシマ 3S ベースプレート フラット

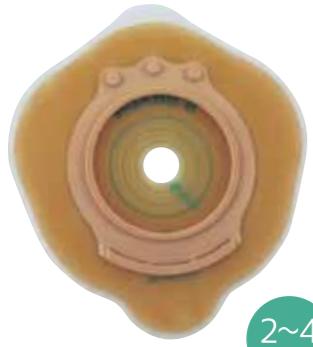

2~4 days

品番	内径(mm)	有効径(mm)	サイズ(mm)	入数(枚)	標準価格
936415G	45	フリーカット(30まで)	124×108	5	¥4,500
936425G		プレカット(25)			
936515G	55	フリーカット(40まで)	132×116		
936535G		プレカット(35)			
936615G	65	フリーカット(50まで)	162×146		
936815G	80	フリーカット(65まで)			

フラワーシェイプ 平面 全面

フレキシマ 3S ベースプレート コンベックス



2~4 days

品番	内径(mm)	有効径(mm)	サイズ(mm)	入数(枚)	標準価格
937415G	45	フリーカット(26まで)	124×108	5	¥5,500
937425G		プレカット(25)			
937515G	55	フリーカット(36まで)	132×116		
937530G		プレカット(30)			
937615G	65	フリーカット(46まで)	162×146		

フラワーシェイプ 凸面 6mm 全面

フレキシマ 3S ロールアップパウチ



品番	内径(mm)	色	サイズ(mm)	入数(枚)	標準価格
932545G	45	透明	304×156	10	¥4,900
932555G	55				
932565G	65				
932580G	80				
932445G	45	肌色			
932455G	55				
932465G	65				

HP フィルター ロールアップ ヘルト穴 入浴用シール①

フレキシマ 3S クローズドパウチ



品番	内径(mm)	色	サイズ(mm)	入数(枚)	標準価格
931555G	55	透明	205×150	10	¥4,000
931565G	65				
931455G	55	肌色			
931465G	65				

HP フィルター クローズ ヘルト穴 入浴用シール①

フレキシマ 3S ウロパウチ



品番	内径(mm)	色	サイズ(mm)	入数(枚)	標準価格
934145G	45	透明	244×151	10	¥6,700
934155G	55				
934165G	65				

ウロ クローズ ヘルト穴 逆流防止弁

※接続管10本付

ストーマケアベルト



品番	サイズ	入数(本)	標準価格
5028G	フリー(110cm)	1	¥1,000

- 面板の固定力・安定感を高めるために使用ください
- ラテックスフリー

抗菌・ウイルス除去 消臭潤滑剤

オストハイジーン



消臭潤滑だけじゃない！ ストーマケアの衛生化に。

サラヤの技術でエンベロープウイルスや菌にも対応した「プラス・ハイジーン処方」を新開発
悪臭原因菌を除菌し、臭いのモトを低減します



消臭



潤滑



除菌



ウイルス
除去

消臭力

オストハイジーン消臭潤滑剤は、3つの消臭成分（緑茶エキス、トウモロコシ由来成分、銅イオン）を組み合わせることで臭気成分を減少させます。さらに、除菌・抗菌効果で悪臭の原因となる菌の増殖を抑え、臭いのモトを低減します。

除菌力

オストハイジーン消臭潤滑剤（60倍希釈）は、悪臭の原因となるグラム陰性菌を99.99%、グラム陽性菌を98%除菌することを検証しました。

■オストハイジーン消臭潤滑剤（60倍希釈）の除菌効果


供試菌	処方	対数減少値 (-Log10 CFU/mL)		減少率 (%)	
		20倍希釈	60倍希釈	20倍希釈	60倍希釈
グラム陰性菌	消臭潤滑のみの処方	0.03	0.04	7.11	8.20
	プラス・ハイジーン処方	5.90	>6.32	>99.999	>99.999
グラム陽性菌	消臭潤滑のみの処方	0.17	0.16	32.039	31.068
	プラス・ハイジーン処方	1.73	1.72	98.139	98.089

潤滑力

ストーマ袋内の衛生に、内容物をスムーズに排出する潤滑性能は重要です。オストハイジーン消臭潤滑剤は、プラス・ハイジーン処方により、優れた潤滑性能を有していることが確認されています。

抗菌力* (悪臭原因菌の増殖抑制)

オストハイジーン消臭潤滑剤（60倍希釈）は、悪臭の原因となるグラム陰性菌とグラム陽性菌の増殖を阻止する高い抗菌効果を示すことを検証しました。

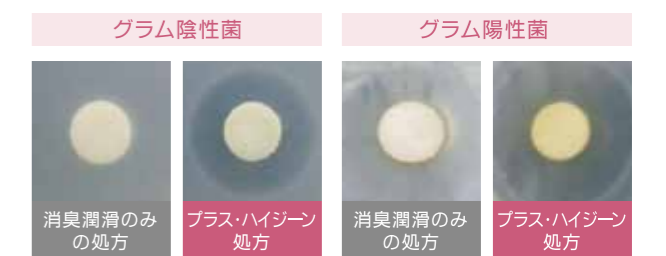

不潔条件下(牛血清アルブミン、綿羊赤血球)にて、60倍希釈試験液と菌を反応させて不活化評価を行いました。
*すべての菌を抗菌するわけではありません

「プラス・ハイジーン処方」でウイルス除去に効果を発揮


除菌・ウイルス除去技術で実績のあるサラヤ株式会社と共同で、消臭剤に除菌・ウイルス除去効果をプラスした「プラス・ハイジーン処方」を開発。オストハイジーン消臭潤滑剤は、エンベロープウイルスを99.9%減少させることを検証しました。

■オストハイジーン消臭潤滑剤のウイルスに対する効果

ウイルス	初期ウイルス感染価 (TCID50/mL)	作用時間	ウイルス感染価	対数減少値	減少率 (%)
ウイルス A (エンベロープあり)	1,00×10 ⁶	1分	≦2.5	>3.50	>99.9
			≦2.5	>3.50	>99.9
		5分	≦2.5	>3.50	>99.9
			≦2.5	>3.50	>99.9
	7.59×10 ⁵	1分	≦2.5	>3.38	>99.9
		5分	≦2.5	>3.38	>99.9

*>3.50, >3.38:検出限界以下

■オストハイジーン消臭潤滑剤のウイルス除去効果

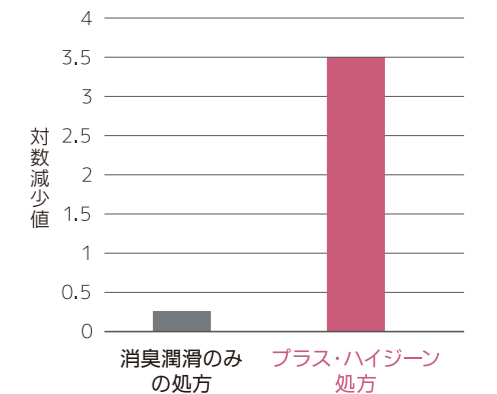

オストハイジーン消臭潤滑剤

品番	容量	入数(本)	標準価格
SRY101	250ml	1	¥2,500

〔成分〕 精製水、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、消臭成分（銅系、緑茶エキス、トウモロコシ由来）、潤滑剤、溶剤、キレート剤、pH調整剤、黄色203

〔使用方法〕

- ストーマ袋に約8mL(大さじ半分)を投入し、袋内に広げてから装着する。
- 装着中に排泄物を処理した際は、もう一度投入し、袋内に広げる。

ロールアップ使用方法

■閉鎖方法



下端のプラスチックプレートをガイドにし、巻き上げを開始します。

4回巻き上げます。

面ファスナーを上からかぶせ止めます。プチプチという面ファスナーの感触がなくなれば、閉鎖完了です。

■排出方法



面ファスナーを外し、スリートを下ろします。
※外す際は排出口を上に向けてください。

下端のプラスチックプレート部分を左右から押すと排出口が開きます。

残っている排泄物を絞り出します。


ロールアップ排出口の特長



排出口の2枚のプラスチックプレートを左右にずらしているのので、排出口を開け易くしています。

プラスチックプレートを左右から押すと軽力で排出口が開くので、操作性が優れています。

クランプ使用方法

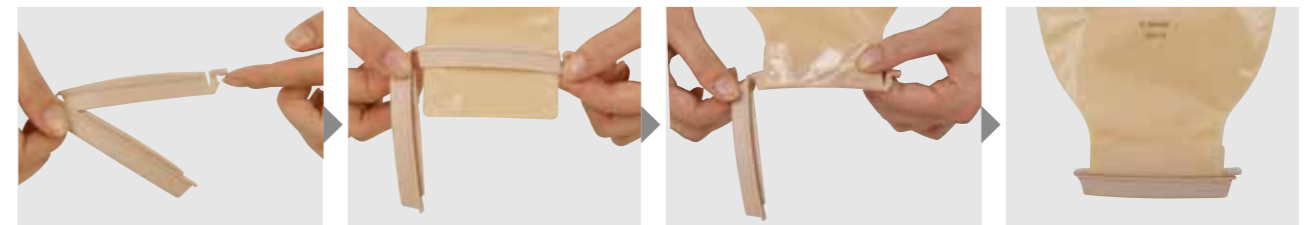

端のレバーを押し上げ、開放状態にします。

排出口にクランプを合わせます。

排出口を上折り返します。

クランプを閉鎖し、排出口を閉鎖します。

ウロ使用方法



購入時は閉鎖されています。


排出する場合は写真の透明プラスチック部分を固定しながら、下の白いプラスチック部分を180度回してください。(一定方向にしか回しません)

プラスチック部分にすき間ができることで、開放が確認できます。

閉鎖する場合、180度逆に回し、元の状態に戻して下さい。キャップをする必要はありません。


ハイフロー使用方法

■接続方法

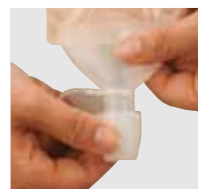

キャップを奥まで差し込みます。

■排出方法

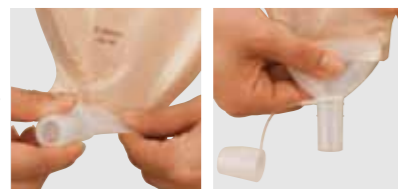

キャップを回しながら外します。
※外す際は排出口を上に向けてください。

残渣物がある場合は指で分解しながら排出してください。

フローコレクター使用方法

■接続方法



蛇管チューブは30cmごとにカットできます。



ハイフローの排出口に差し込みます。

■排出方法



キャップを外し、排出します。
※外す際は排出口を上に向けてください。

入浴用シール使用方法 ※入浴後、通常の使用に戻る際は入浴用シールを外してください。

■HPフィルター



付属の入浴用シールを1枚、フィルターを覆うように貼ります。



フィルター全体がシールで覆われていることを確認してください。

■LKP フィルター、脱臭フィルター



付属の入浴用シールを1枚、フィルター出口に貼ります。




一番細い部分で山折りにして、フィルター出口をふさぎます。

接続管使用方法

レッグバッグなどに接続する際に使用ください。
くるくる回転するので袋がねじれません。

■取付方法

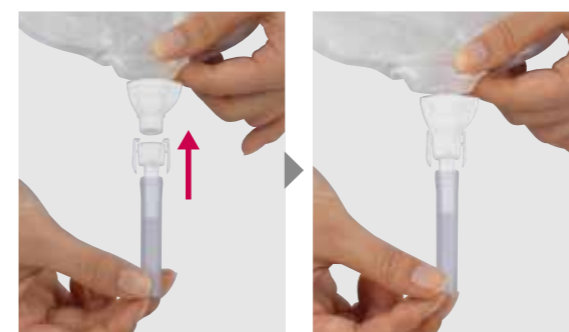

接続管を排出口に向かって差し込みます(赤矢印)。カチッと音がしたら取付完了です。



レッグバッグなどに接続する場合は、ウロ排出口が開放状態になっていることを確認してください。

■取外方法



2ヶ所のウイング部分(青矢印)を押しながら、赤矢印の方向へ向かって引っ張ります。

逆流防止弁



袋が多層構造になっており、袋にたまった尿が面板に逆流するのを防ぎます。