



IV Accessories

Caresite[®]

ケアサイト

陽圧置換型ニードルレスバルブ

生食ロック又はヘパリンロック時の
陽圧ロック手技が不要

Caresite®

ケアサイト 陽圧置換型ニードルレスバルブ


生食ロック又はヘパリンロック時の陽圧ロック手技が不要

ケアサイトは中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、生食ロックやヘパリンロックを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減する製品です。



フィンガーグリップ

保持した際に滑りにくい形状です。

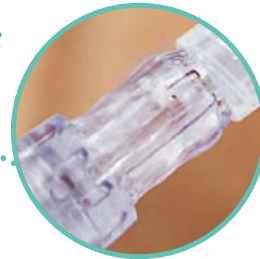

透明ハウジング

薬液の残液/残血の確認ができます。

耐圧性能

300psi未満での高圧注入が可能です。
(単体/20cm延長チューブ付)




フラットデザイン

接続口がフラットデザインのため、消毒を容易に行うことが可能です。



イージーコネクション

軽い力でデバイスを接続することが可能です。

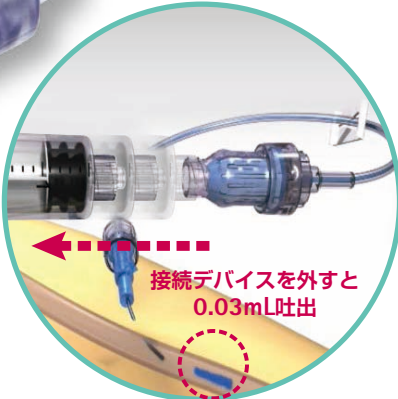

接続デバイスを外すと
0.03mL吐出

陽圧置換型ニードルレスバルブ



接続デバイスを外した瞬間にバルブ内が陽圧となり、血液を引き込むリスクを低減します。

Caresite® Stabilizer

ケアサイト スタビライザー付

静脈留置カテーテル固定時の末梢トラブルを低減

スタビライザーをチューブ先端にスライドさせて固定します。末梢カテーテル上部からの押付けに対してカテーテルを安定させる事ができます。

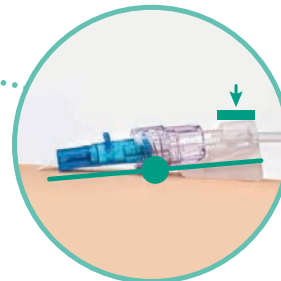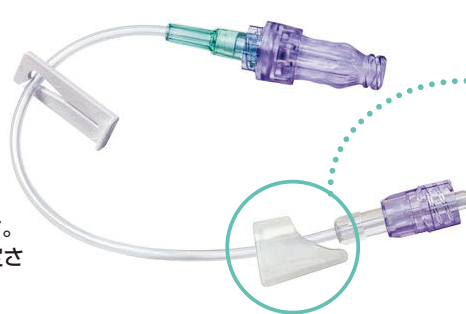

品番	製品名	製品仕様	内容量	耐圧性能	包装単位	販売単位
415122	ケアサイト	コネクタ単体	0.2mL	300psi	100個/箱	1箱
470100	ケアサイト 延長チューブ付	20cmチューブ付	0.5mL	300psi	100個/箱	1箱
470104	ケアサイト 延長チューブ付	36cmチューブ付	0.7mL	—	100個/箱	1箱
470106	ケアサイト Y型延長チューブ付	18cmY型チューブ付	0.9mL	—	50個/箱	1箱
470108	ケアサイト 延長チューブ付	15cmラージボアチューブ付	0.9mL	—	100個/箱	1箱
470185	ケアサイト 延長チューブ・スタビライザー付	20cmチューブ・スタビライザー付	0.6mL	300psi	100個/箱	1箱
470188	ケアサイト 延長チューブ・スタビライザー付	20cmラージボアチューブ・スタビライザー付	0.7mL	300psi	100個/箱	1箱

販売名：ケアサイト 届出番号：13B1X00218474023

製造販売元

ビー・ブラウンエスクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター

TEL 0120-401-741(フリーダイヤル)

<http://www.bbraun.jp/>

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。