


Aesculap® NOIR® Suprême Micro Instruments

Micro Instruments for Cardiac- and Vascular Surgery

NOIR Supreme マイクロインストルメンツ

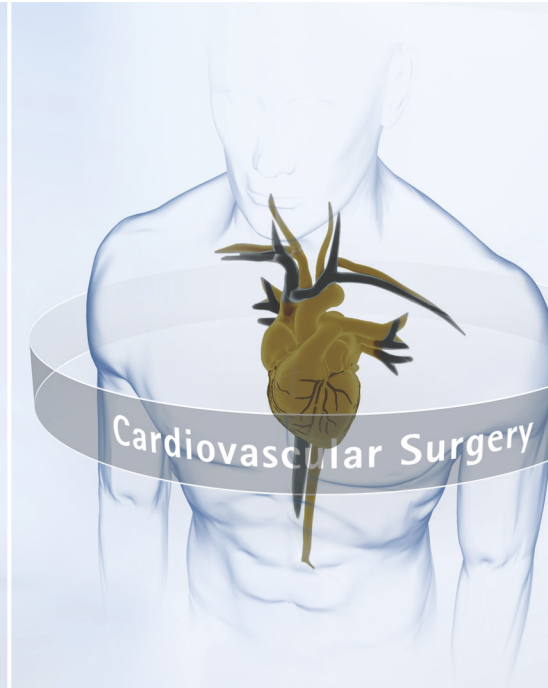

Surgical Technologies

Aesculap® NOIR® Suprême Micro Instruments

**Think Innovation.
Think Aesculap.**






Aesculap® NOIR® Suprême Micro Instruments


Feel the difference

Fühlen Sie den Unterschied

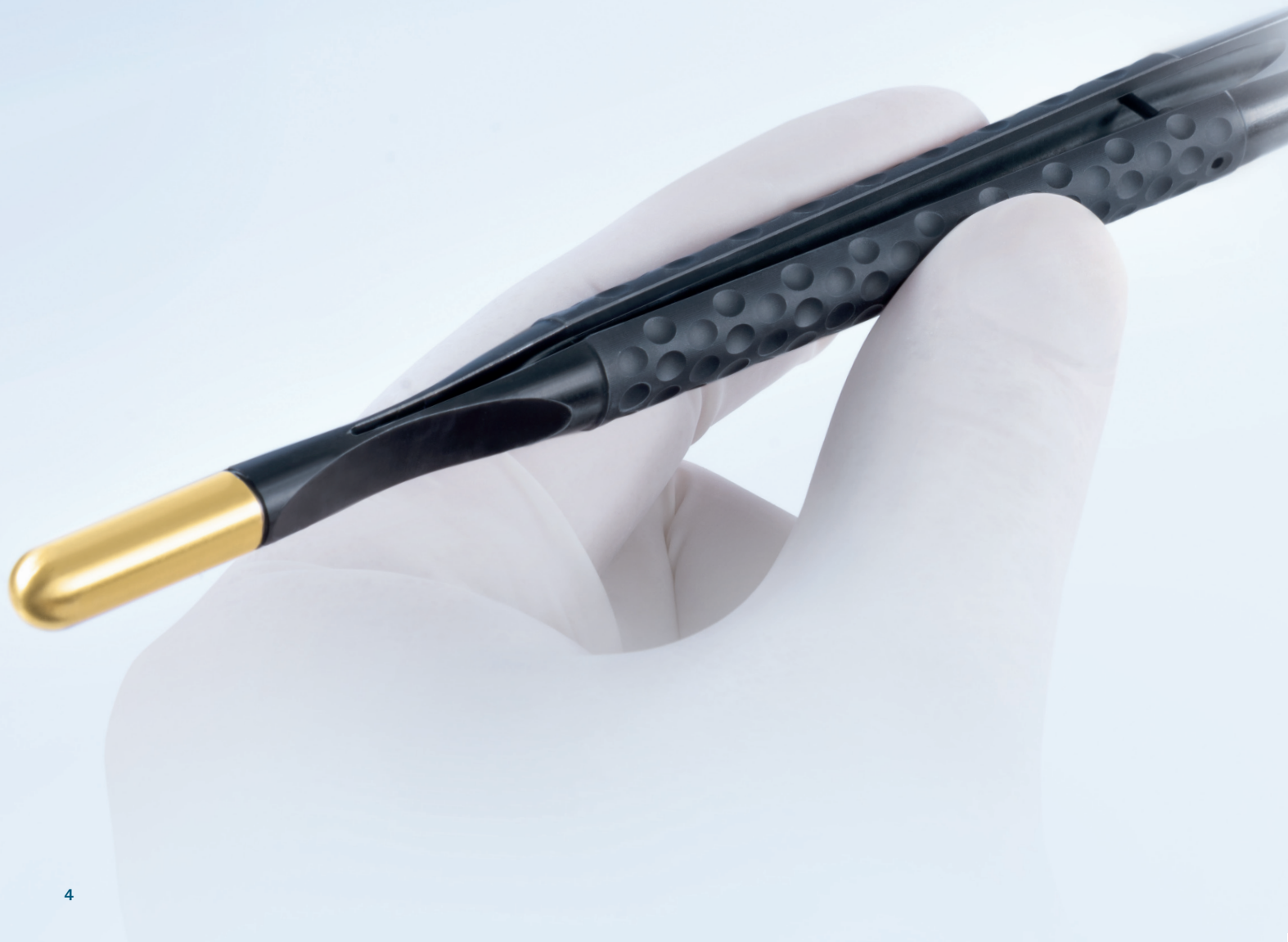


エルゴノミックなハンドルデザイン

円筒状のハンドルデザインを採用することで、位置調整がしやすく、良好な視野を確保することができます。
ハンドルを閉じるとピンを回すように回転操作をすることができます。

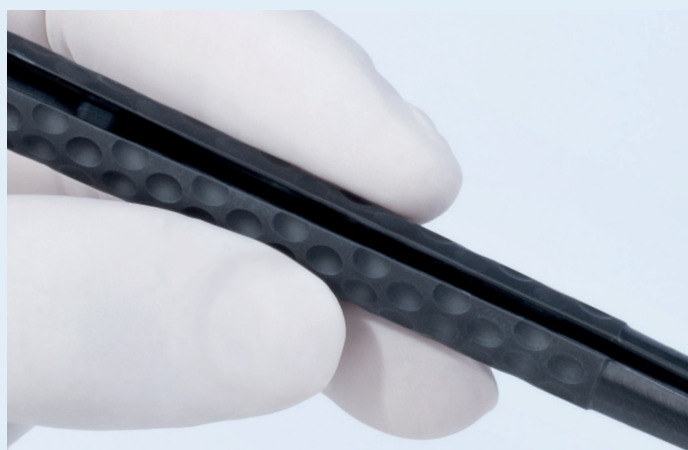

ゴルフボールデザイン

特徴的なゴルフボールデザイン構造により洗浄がしやすく、また安定して握りこみやすいため術者の疲労を軽減します。

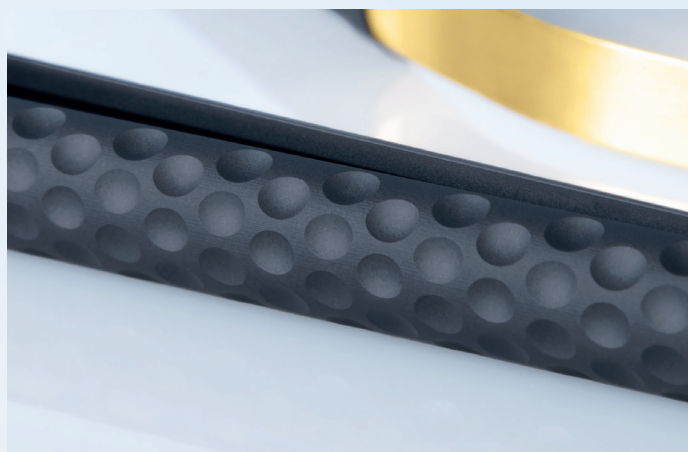

NOIR[®]コーティング

硬度が高く、无影灯による反射の少ないNOIR[®]コーティングを採用し、耐摩耗性、耐腐食性を追求しました。



Aesculap® NOIR® Suprême Micro Instruments


A large area with little space

Große Fläche auf kleinem Raum



Feel the difference

Fühlen Sie den Unterschied

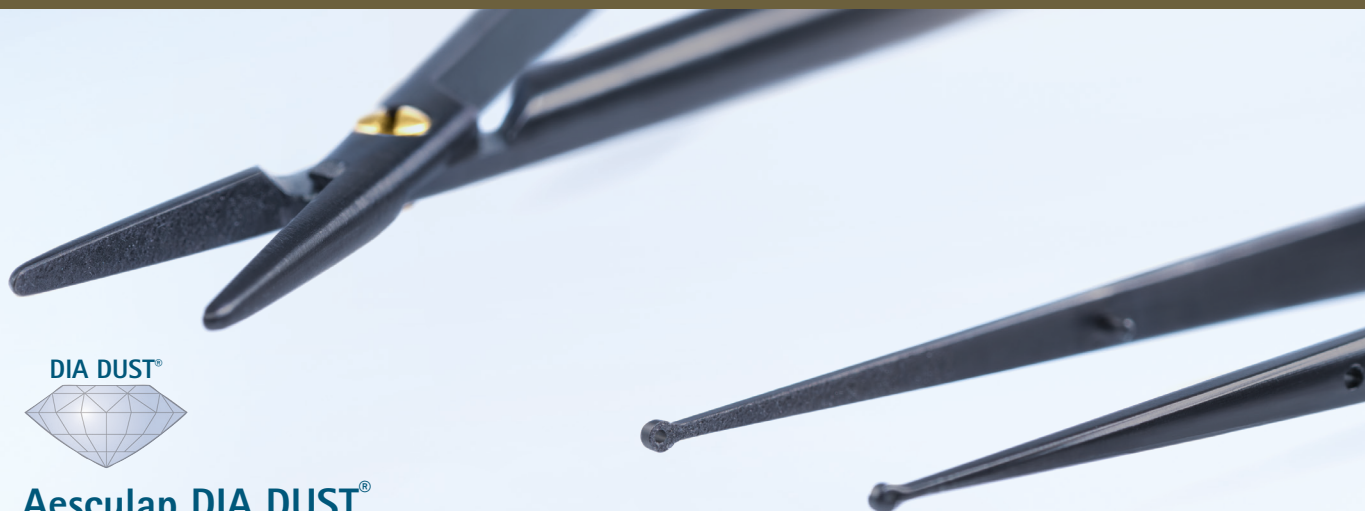

DIA DUST®



Aesculap DIA DUST®

持針器と鑷子(ドゥベキータイプを除く)の先端にはAesculap DIA DUST®が施されています。DIA DUST®コーティングは非常に硬いため、摩耗しにくく、長くご使用いただけます。

また、DIA DUST®コーティングによる凹凸が表面面積を増やすため、よりしっかり把持することができます。

ジョイント構造

スプリングの端が滑らかな構造となっている為、糸を挟み込む心配はありません。このジョイント構造により、器具を安定させ、ジョーの繊細な噛み合わせが実現しました。また、この構造の採用により、ロック機能が改善されました。ジョイント部を外せる為、しっかりと洗浄、メンテナンスを実施することもできます。



Aesculap® NOIR® Suprême Micro Instruments

Precision in your hands

Präzision in Ihren Händen





ロックデザイン

ロック機構が改善され、追加のガイドピンにより、ロックがかかりやすくなりました。



ガイドピン

鉗子に装備されたガイドが先端のシザリングを防止し、糸針や柔らかい組織の把持に対しても安心してご使用いただけます。

Aesculap® NOIR® Suprême Micro Instruments

マイクロピンセット

ジョー先端リング：φ1mm



ジョー先端リング：φ1mm、錘付き



品番	FM627B	FM628B
全長	185 mm	210 mm

品番	FM637B	FM638B	FM639B
全長	185 mm	210 mm	230 mm

ジョータイプ: プラットホームチップ

ジョー先端: ϕ 1mm、ドゥベキー



品番

FM617B

FM618B

全長

185 mm

210 mm



品番

FM647B

FM648B

全長

185 mm

210 mm

Aesculap® NOIR® Suprême Micro Instruments

マイクロ持針器

縫糸糸適合サイズ: 7/0以下



品番	FM640B	FM642B	FM644B
全長	185 mm	210 mm	230 mm

縫合糸適合サイズ: 5/0以下



品番	FM650B	FM652B	FM654B
全長	185 mm	210 mm	230 mm

Aesculap® NOIR® Suprême Micro Instruments

マイクロ剪刀

全長:165mm
ブレード長:10mm



FM610B



FM611B



FM612B

25°



FM613B

45°



FM614B

60°



FM615B

90°



FM616B

125°

トレイ

JF252R	×1	ニューパーフォバケット ミドルサイズ	406×253×56mm
JG360	×2	シリコンセパレートラック	243×41mm
JG300		固定ピン Aタイプ 10個入り	
JG318	×2	シリコンラック TYPE4	240×40mm
JF257R	×1	ニューパーフォバケット蓋 ミドルサイズ	410×257mm
JK740	×1	滅菌コンテナー底 ミドルサイズ	470×274×90mm
JK788	×1	滅菌コンテナー蓋 ミドルサイズ ゴールド	465×285mm



INDEX

	品番	仕様	ページ
マイクロピンセット	FM627B	185mm ジョー先端リング：φ1mm	10
	FM628B	210mm ジョー先端リング：φ1mm	
	FM637B	185mm ジョー先端リング：φ1mm、錘付き	
	FM638B	210mm ジョー先端リング：φ1mm、錘付き	
	FM639B	230mm ジョー先端リング：φ1mm、錘付き	
	FM617B	185mm ジョータイプ：プラットホームチップ	11
	FM618B	210mm ジョータイプ：プラットホームチップ	
	FM647B	185mm ジョー先端：φ1mm、ドゥペーキー	
	FM648B	210mm ジョー先端：φ1mm、ドゥペーキー	
マイクロ持針器	FM640B	185mm 縫合糸適合サイズ：7/0以下	12
	FM642B	210mm 縫合糸適合サイズ：7/0以下	
	FM644B	230mm 縫合糸適合サイズ：7/0以下	
	FM650B	185mm 縫合糸適合サイズ：5/0以下	13
	FM652B	210mm 縫合糸適合サイズ：5/0以下	
	FM654B	230mm 縫合糸適合サイズ：5/0以下	
マイクロ剪刀	FM610B	165mm ブレード長：10mm	14
	FM611B	165mm ブレード長：10mm	
	FM612B	165mm ブレード長：10mm 25°	
	FM613B	165mm ブレード長：10mm 45°	
	FM614B	165mm ブレード長：10mm 60°	
	FM615B	165mm ブレード長：10mm 90°	
	FM616B	165mm ブレード長：10mm 125°	
	トレー	JF252R	
JG360		シリコンセパレートラック 243×41mm	
JG300		固定ピン Aタイプ 10個入り	
JG318		シリコンラック TYPE4 240×40mm	
JF257R		ニューパーフォバスケット蓋 ミドルサイズ 410×257mm	
JK740		滅菌コンテナー底 ミドルサイズ 470×274×90mm	
JK788		滅菌コンテナー蓋 ミドルサイズ ゴールド 465×285mm	

AESFULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター：☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)
www.bbraun.jp

本カタログ掲載製品の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。