



Spine

AESCULAP[®] CASPAR Classic MLD System

Micro Lumbar Discectomy


CASPAR Classic MLD System

CASPAR Classic MLD Systemは、

腰椎疾患に対する低侵襲後方アプローチ用のレトラクターシステムです。

光の反射を抑制するために黒色にコーティングされたスペキュラと2種類のプレートを組み合わせることで、良好な「術野」および「操作性」とさまざまな手技への「汎用性」を両立します。

Specula

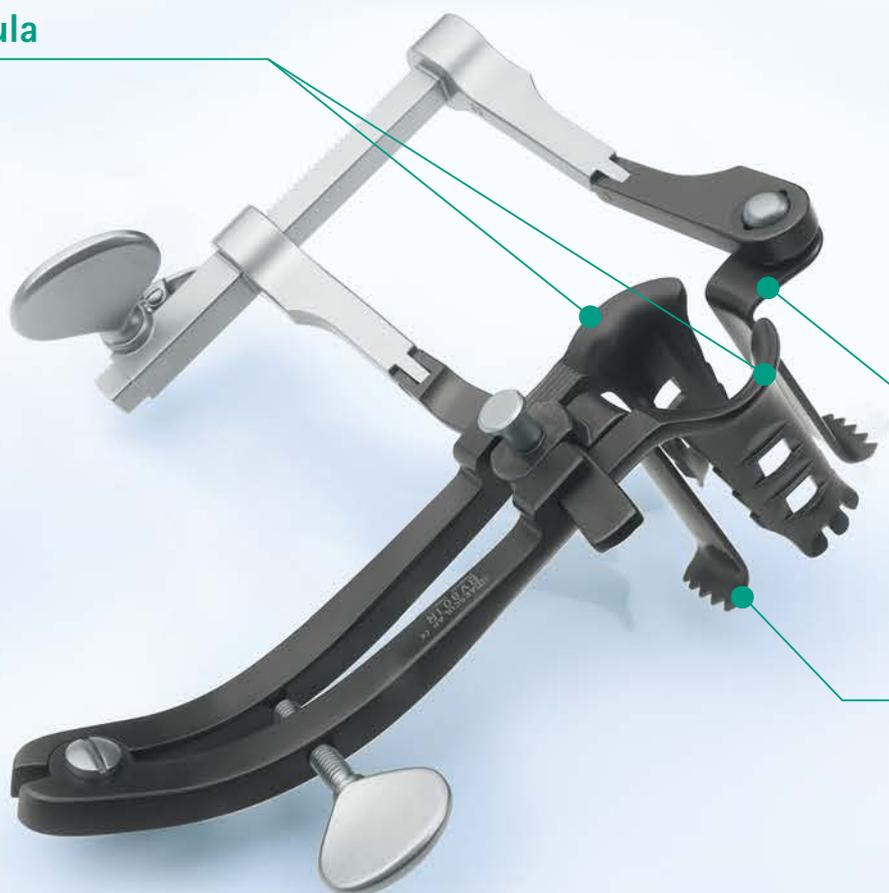

Lateral Blades

Medial Blades

Versatility

CASPAR Classic MLD Systemは、腰椎椎間板ヘルニアに対する顕微鏡視下腰椎椎間板切除術(Micro Lumbar Discectomy)はもちろんのこと、椎弓切除術(Laminectomy)や椎間孔拡大術(Foraminotomy)においても使用可能です。

また、後方進入腰椎椎体間固定術(PLIF)や経椎間孔腰椎椎体間固定術(TLIF)などの固定術では、椎体間ケージの挿入、椎弓根スクリューの刺入経路の確保にも用いることができます。

シンプルな構造と直感的な操作性、そして豊富なサイズバリエーションにより、様々な症例、術式への応用を実現します。

Features & Benefits



Specula

頭尾側方向へのレトラクションに用います。スペキュラ表面に有窓鋸齒加工を施すことで、術中、予期せず回旋したり浮き上がったたりする現象を抑制します。



Lateral Blades

スペキュラにラテラルブレードを組み合わせることで、外側へのレトラクションを同時に行うことができ、良好な術野を確保することを可能にします。

しっかりとした装着感と速やかな取り外し操作を可能にするため、レトラクター本体とラテラルブレードの着脱構造にはボールスナップ機構を採用しています。



Medial Blades

内側方向から軟組織が術野を妨げている場合には、ミディアルブレードを追加することで四方向へのレトラクションが可能となります。スペキュラ、ラテラルブレード同様、豊富なサイズをラインナップしています。

Components

Complete Blade Range



ラテラルブレード、ボールスナップ

品番	長さ
BV870R	35mm
BV871R	40mm
BV872R	45mm
BV873R	50mm
BV874R	55mm
BV875R	60mm
BV876R	65mm
BV877R	75mm
BV878R	85mm



ミディアルブレード

品番	長さ
BV851R	40mm
BV852R	45mm
BV853R	50mm
BV854R	55mm
BV855R	60mm
BV856R	65mm
BV857R	70mm



スペキュラ、カスパー

品番	長さ
BV799R	40mm
BV800R	45mm
BV801R	50mm
BV802R	55mm
BV803R	60mm
BV804R	65mm
BV806R	75mm
BV808R	85mm

Retractors & Others



BV812R レトラクター



BV399R ブレードリムーバー



FG171P MLDトレイ1

JF223R MLDトレイ1用ワイヤーバスケット

FG172P MLDトレイ2

JF222R MLDトレイ2用ワイヤーバスケット

JF227R ワイヤーバスケット用蓋

AESCULAP® - a B. Braun brand

販売名：
カスパーマイクロ腰椎手術器械
開創器

届出番号：
13B1X00218258022
13B1X00218150005

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター：☎ 0120-16-1743(フリーダイヤル)

Homepage : www.bbraun.jp

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。