



Spine

AESCULAP® CCR PEEK System

CCR PEEK System

CCR(Caspar Cervical Retractor) PEEK Systemは、脊椎頸部にアプローチするためのレトラクターシステムです。本システムは、2種類のレトラクターと豊富なサイズバリエーションを有するユニークなデザインのdetachable bladeにより構成されています。術中の「使い易さ、取り回し易さ」を追求して生まれた本システムは、従来のレトラクターでは味わえなかった快適な操作性と、様々な症例に対応可能な汎用性を実現しています。また、ブレードとアーム先端部に強化PEEK素材を採用することで、術中X線操作時にレトラクターを術野から取り外すことなく、クリアな写真撮影と画像判断を行うことが可能です。

Side Loading Mechanism


- 側面から着脱するサイドローディングメカニズムを採用することで、ブレード着脱時の操作性が向上しました。
- ブレードを装着したレトラクターハンドルにて術野を開大・維持しつつ、レトラクターをスライド装着させることで、思い通りの展開野を確保することが可能です。



Features & Benefits

Double Hinge Retractor

- アーム部分には合計4ヶ所のHingeを設置しました。術者の思い通りの形状に本体を調整することで、術野においてレトラクター本体が手術操作を妨げません。
- レトラクター本体形状は2種類から選択可能です。展開部位や術者の好みにより組み合わせは自由自在です。
- バタフライスクリューは可倒式を採用しました。開大時以外はフラットにできるため、手術操作時にバタフライスクリューが干渉しません。

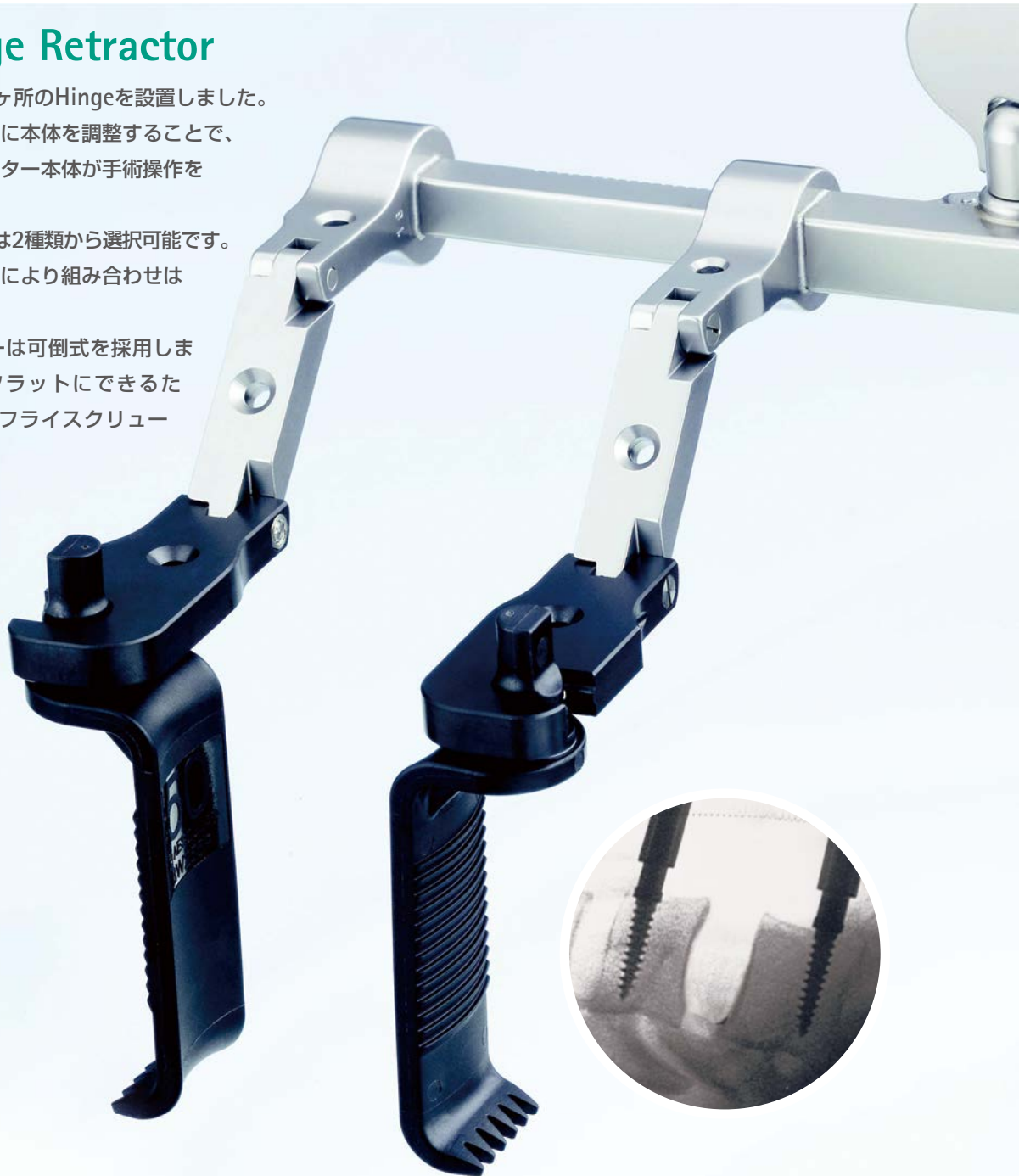

PEEK Blade for Full Radiolucency

- ブレードとレトラクターアーム先端部にX線を完全に透過する強化PEEK素材を採用しました。術中レトラクターを取り外すことなく、X線写真撮影やインストゥルメンテーションを行うことが可能です。
- 軟組織との接触面に逆鋸歯表面加工を施したことで、術中、レトラクターが浮き上がる現象を抑制します。
- ブレードカラーはブラックを採用することにより、顕微鏡使用下における光反射を抑制します。

CCR PEEK System Components

Complete Blade Range

- ブレード先端形状は2種類から選択可能です。またブレード長は30mmから70mmまで、5mmピッチでラインナップ。展開部位や様々な解剖学的特徴に合わせて最適な形状・長さのブレードが選択可能です。
- ブレード幅は19mm。小皮切アプローチにも適しています。

PEEKサービカルブレード

品番	幅 × 長さ
BW251P	19 × 30mm
BW252P	19 × 35mm
BW253P	19 × 40mm
BW254P	19 × 45mm
BW255P	19 × 50mm
BW256P	19 × 55mm
BW257P	19 × 60mm
BW258P	19 × 65mm
BW259P	19 × 70mm



PEEKプラントブレード

品番	幅 × 長さ
BW261P	19 × 30mm
BW262P	19 × 35mm
BW263P	19 × 40mm
BW264P	19 × 45mm
BW265P	19 × 50mm
BW266P	19 × 55mm
BW267P	19 × 60mm
BW268P	19 × 65mm
BW269P	19 × 70mm



Retractors & Others



BW137R PEEKカウンターレトラクター



BW139R PEEK頸椎レトラクター



BW125P 専用トレイ



BW010R レトラクターハンドル



BW011P デプスゲージ用ロッド

AESCULAP® - a B. Braun brand

販売名： CCRピークブレード
販売名： カスパー頸椎用開創器
届出番号： 13B1X00218250006
届出番号： 13B1X00218250002

製造販売元 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター：☎ 0120-161-743(フリーダイヤル)

Homepage: www.bbraun.jp

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
本カタログ掲載の製品毎の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。