

Perifix® Epidural System


ペリフィックス硬膜外麻酔システム

安全な硬膜外麻酔を追求し、製品を通じてサポートします。




ペリフィックス・ワン カテーテル

長年のノウハウを集約し独創的なカテーテルを開発

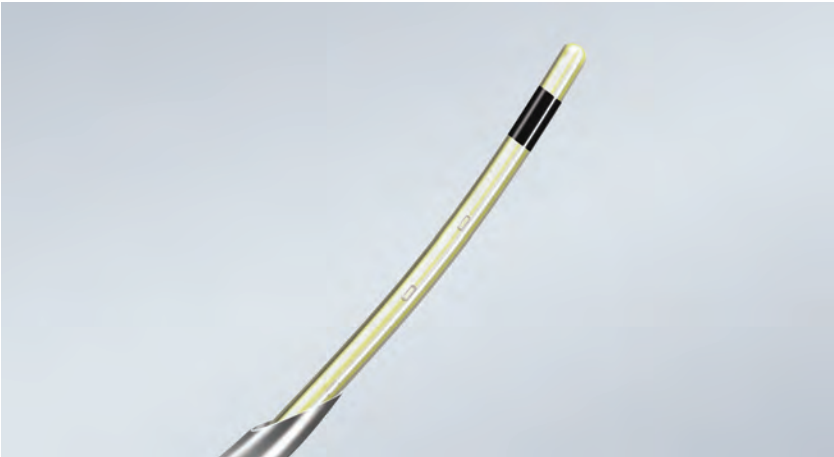

先端部テーパー形状カテーテル

先端部をテーパー形状にすることで柔軟性をもたせた硬膜外カテーテルです。
その特徴を活かし血管内・くも膜下腔への迷入リスクを低減した手技を行うことができます。

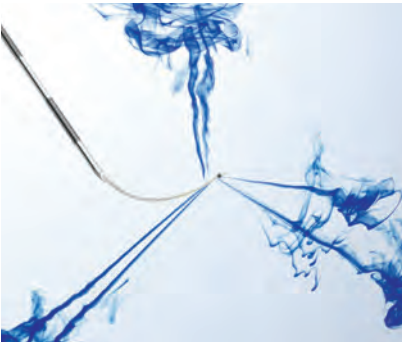


側孔からの薬液の拡散状況

- 6カ所の側孔から薬液が容易に拡がります。
- 側孔は2組ずつのマイクロホールが異なる3つの方向に開いています。



カテーテルの構造

- 外層は適度な柔らかさのポリウレタン(PUR)です。
- 内層は腰のあるポリアミド(PA)と3本の黄色のX線不透過ラインが入っています。

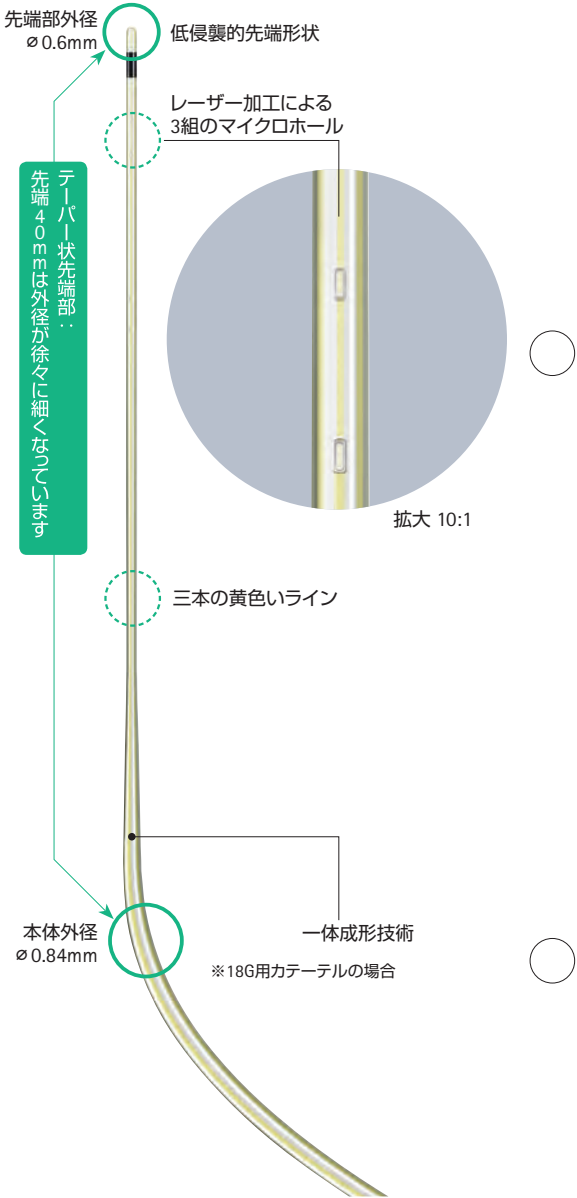

セット製品

品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
PMS-Y18N	ペリフィックス ミニセット	18G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン18G×80mm/ カテーテルコネクタ	10セット/箱	1箱
PFS-Y18RN	ペリフィックス フィルターセット	18G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン18G×80mm/ カテーテルコネクタ/ロウメッドフィルタ	10セット/箱	1箱
PFS-Y18LRN	ペリフィックス フィルターセット	18G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン18G×80mm/ カテーテルコネクタ/ロウメッドフィルタ/LORシリンジ	10セット/箱	1箱
PFS-Y20LRN	ペリフィックス フィルターセット 小児用	20G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン20G×80mm/ カテーテルコネクタ/ロウメッドフィルタ/LORシリンジ	10セット/箱	1箱
PFS-YP20RN	ペリフィックス フィルターセット 小児用	20G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン20G×50mm/ カテーテルコネクタ/ロウメッドフィルタ	10セット/箱	1箱
PFS-YP20LRN	ペリフィックス フィルターセット 小児用	20G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン20G×50mm/ カテーテルコネクタ/ロウメッドフィルタ/LORシリンジ	10セット/箱	1箱

ソフトチップカテーテル

安全な硬膜外麻酔への貢献



先端部ソフトチップカテーテル

先端部のみ柔軟なソフトチップにすることで放散痛や硬膜への影響と、血管内・くも膜下腔への迷入リスクを低減します。



■ 生体適合性を考慮したカテーテル

カテーテル挿入に伴うトラブルを低減するソフトチップカテーテルです。



■ カテーテルの構造

- 先端にポリエーテルブロックアミドを使用し本体にポリアミド(PA)を使用しています。
- 側孔3孔式により薬液の広がり良く、片効きのリスクを低減します。



■ 適度な腰の強さのカテーテル本体

硬膜外腔での直進性をサポートします。

セット製品

品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
PMS-S18N	ベリフィックス ミニセット	18G用ソフトチップ カテーテル/ベリカン18G×80mm/カテーテルコネクター	10セット/箱	1箱
PFS-S17RN	ベリフィックス フィルターセット	18G用ソフトチップ カテーテル/ベリカン17G×80mm/カテーテルコネクター/ロワメッドフィルタ	10セット/箱	1箱
PFS-S18RN	ベリフィックス フィルターセット	18G用ソフトチップ カテーテル/ベリカン18G×80mm/カテーテルコネクター/ロワメッドフィルタ	10セット/箱	1箱
PFS-S18LRN	ベリフィックス フィルターセット	18G用ソフトチップ カテーテル/ベリカン18G×80mm/カテーテルコネクター/ロワメッドフィルタ/LORシリンジ	10セット/箱	1箱

ペリフィックス FXカテーテル

硬膜外麻酔用カテーテルの新たな提案



スプリングコイル内蔵カテーテル(19G)

X線不透過性で留置後の位置確認が容易になります。また、キンク抵抗性が高い為薬液の注入流量の安定性が向上しました。

■ 柔軟性を得るための工夫


カテーテル内部のコイルの疎密を調整することで、より臨床に適した柔軟性を実現しています。

■ コイル式カテーテルとして初の側孔タイプ

薬液の広がりが向上し、片効きのリスクを低減します。

■ 滑らかに成形された先端部

挿入時の抵抗を軽減します。

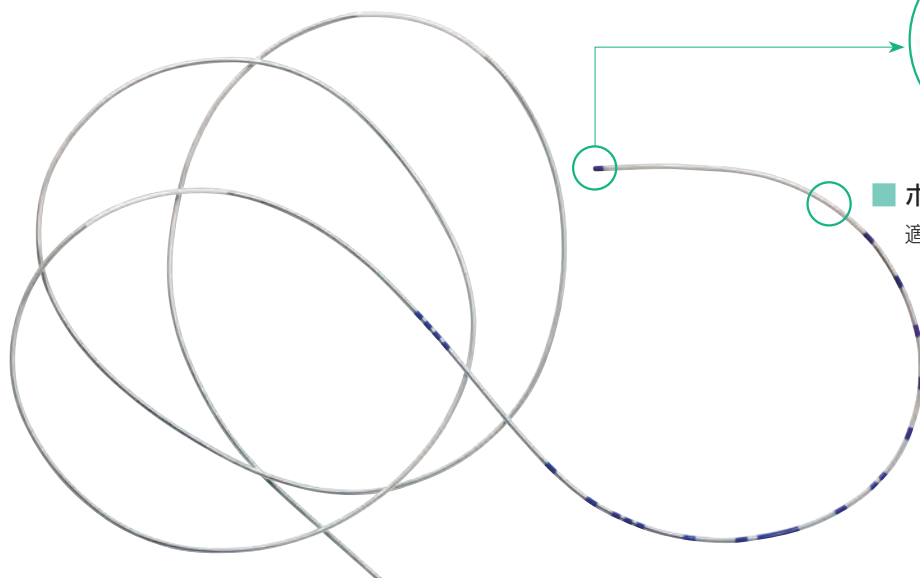

■ ポリアミド製のカテーテル本体

適度な柔軟性とコシの強さを併せ持っています。

セット製品

品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
PFS-W17RN	ペリフィックス フィルターセット	17G用ペリフィックス FXカテーテル/ペリカン17G×80mm/ カテーテルコネクター/ロウメッドフィルタ	10セット/箱	1箱

硬膜外カテーテル

ペリフィックス® カテーテル	外径(G)／長さ(mm)	適合硬膜外針(G)	販売単位(本)	品番
	ペリフィックス® ソフトチップカテーテル			
	20G×1000	18	25	4515048N-01
	ペリフィックス® ワン カテーテル			
	20G×1000	18	25	45131501N-01

アクセサリ

ロワメッドフィルタ	ポアサイズ(μm)	販売単位(個)	品番
	0.2	50	A-6750-88

ペリフィックス® カテーテルコネクタ	適合カテーテルサイズ(G)	販売単位(個)	品番
	20/24	25	4513800N-01
	19	5	4513801N-01

ペリフィックス® LORシリンジ	販売単位(本)	品番
	スリップタイプNRfit®	
	25	4637110
	ロックタイプNRfit®	
	25	4638110

ペリフィックス® フィルターストロー	Particle filter(μm)	ストロー長さ(cm)	販売単位(個)	品番
	5	4.5	50	4550250N
	5	10		4550200N

ペリフィックス スタンダードキット

品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
PSK-Y1000RN	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ワンカテーテル/ フルカバー/ロウメッドフィルタ/LORシリンジ/消毒用スポンジ/ 注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-Y2000RN	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ワンカテーテル/ フルカバー/ロウメッドフィルタ/ガラスシリンジ/消毒用スポンジ/ 注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-S1000RN	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ソフトチップカテーテル/ フルカバー/ロウメッドフィルタ/LORシリンジ/消毒用スポンジ/ 注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-S2000RN	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ソフトチップカテーテル/ フルカバー/ロウメッドフィルタ/ガラスシリンジ/消毒用スポンジ/ 注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-W1000RN	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン17G×80mm/17G用ペリフィックス FXカテーテル/ フルカバー/ロウメッドフィルタ/LORシリンジ/消毒用スポンジ/ 注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-W2000RN	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン17G×80mm/17G用ペリフィックス FXカテーテル/ フルカバー/ロウメッドフィルタ/ガラスシリンジ/消毒用スポンジ/ 注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱

PSK-S2000RN





PSK-W2000RN



エスポカン

脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔用カテーテル穿刺針セット

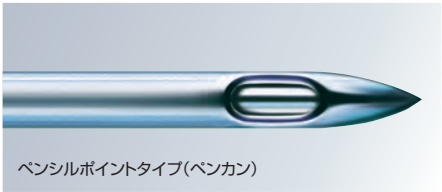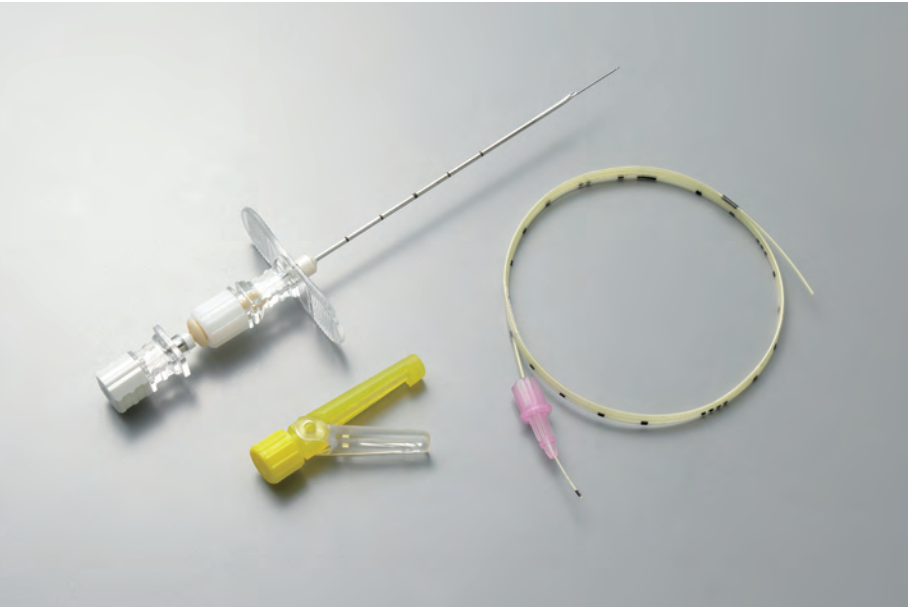


ペンシルポイントタイプ(ペンカン)


- ドッキングシステムにより脊麻針を自由な位置で固定できます。
- 脊麻針が開口部を通過するようスリーブを付けています。
- ツーイ針は大型ウィング付きです。
- 硬膜外カテーテルはソフトチップとペリフィックス・ワンの2種類から選び頂けます。



ドッキングシステム

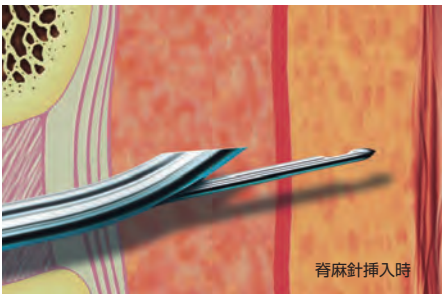

脊麻針挿入時

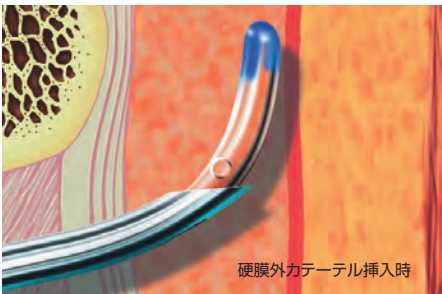

硬膜外カテーテル挿入時

- 矢印方向に回すことで、脊麻針を一時的に固定します。
- ツーイ針の先端部に脊麻針用の開口部(バックアイ)を設置しました。
- 硬膜外カテーテルは通常のツーイ針使用時と同様のルートにて挿入されます。

品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
EFSD-S1827PRN	エスポカン フィルターセット	エスポカン18G×80mm/ペンカン27G×130mm 18G用 ソフトチップカテーテル/カテーテルコネクター/ロワメッドフィルタ	10セット/箱	1箱
EFSD-Y1827PRN	エスポカン フィルターセット	エスポカン18G×80mm/ペンカン27G×130mm 18G用ペリフィックス・ワン カテーテル/カテーテルコネクター/ロワメッドフィルタ	10セット/箱	1箱

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター：☎ 0120-401-741（フリーダイヤル）
www.bbraun.jp

製品のご使用にあたっては、電子化された添付文書を必ずお読みください。
本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

販売名：	承認/認証/届出番号：
ペリフィックス	20200BZY00051000
ビー・ブラウンLORシリンジ	13B1X00218448003
ペリフィックス カテーテルコネクタ	13B1X00218451015
麻酔用フラットフィルタ	22900BZX00240000
ペリフィックスカテーテル	22100BZX00467000
RoweMed フィルタ	226AABZX00019000