



Regional
Anesthesia

Contiplex series

コンティプレックス ウルトラ 360

コンティプレックス C

Continuous Peripheral Nerve Block Needle


B. Braun Contiplex series

持続末梢神経ブロック with デュアルガイダンス

コンティプレックスシリーズは全てデュアル 超音波ガイドと神経刺激

Contiplex Ultra 360

スタンダードなThrough-the Needleタイプは、“視点を変えずに一連の手技”がコンセプト。高反射のXパターンがブロック針先端の全周（360°）に施され、超音波ガイド下での描出性が向上

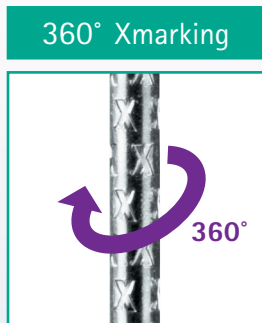

Contiplex Ultra 360

品番	製品名	仕様	セット内容	入数
4898705NR-01	コンティプレックスウルトラ 360	ツイーセット	コンティプレックスカテーテル 18G用 40cm / コンティプレックスウルトラ360 ツイー 18Gx50MM / カテーテルコネクタ / フラットフィルタ / サイドポート / 5mLシリンジNRFit / ピンパッド	10セット/箱
4898710NR-01	コンティプレックスウルトラ 360	ツイーセット	コンティプレックスカテーテル 18G用 100cm / コンティプレックスウルトラ360 ツイー 18Gx100MM / カテーテルコネクタ / フラットフィルタ / サイドポート / 5mLシリンジNRFit / ピンパッド	10セット/箱
4898650NR-27	コンティプレックスウルトラ 360	Sセット	コンティプレックスカテーテル 18G用 40cm / コンティプレックスウルトラ360 S 18Gx50MM / カテーテルコネクタ / フラットフィルタ / サイドポート / 5mLシリンジNRFit / ピンパッド	10セット/箱
4898610NR-27	コンティプレックスウルトラ 360	Sセット	コンティプレックスカテーテル 18G用 100cm / コンティプレックスウルトラ360 S 18Gx100MM / カテーテルコネクタ / フラットフィルタ / サイドポート / 5mLシリンジNRFit / ピンパッド	10セット/箱



超音波ガイド対応加工




神経刺激対応加工

ガイダンス対応 の併用による安全性と正確性

Contiplex C

- 針をカテーテル内部から通して刺入するCatheter-Over-the-Needleタイプは、従来の持続末梢神経ブロックと比べて、手技工程の効率化、刺入部の液漏れやカテーテル抜けに対して新たなアプローチをご提案

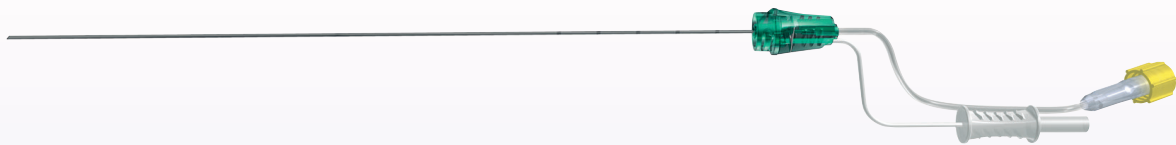

○



全長の長い針をCグリップを使って少しずつ刺入



内針を引き抜くだけでカテーテルを留置

Contiplex C

品番	製品名	セット内容	入数
4898115NR	コンティプレックス C	25Gx190mm/カテーテル19Gx190mm/フラットフィルタ/ カテーテルコネクタ/ 延長チューブ500mm / ピンパッド	5セット/箱

神経刺激装置



品番	製品名	製品仕様	包装・販売単位
4892098	スティムブレックスHNS12	SENSe機能付 9V電源仕様 接続ケーブル・試験用抵抗器付	1台
4892099	マッピング用電極ペン	スティムブレックス専用体表面 マッピング用電極ペン (オプション品)	1本
4892095	スティムブレックス 専用ケース	スティムブレックスHNS12 専用ケース補充用	1個
4892096	スティムブレックス用 試験用抵抗機器	スティムブレックスHNS12専用 試験用抵抗機器補充用	1個
4892070	スティムブレックスHNS12 専用接続ケーブル	接続ケーブル	1本

製造販売元
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター
TEL 0120-401-741 (フリーダイヤル)
www.bbraun.jp

製品名: コンティブレックスウルトラ 360
承認番号: 30200BZX00125000
製品名: コンティブレックス C
承認番号: 22600BZX00431000
製品名: スティムブレックスHNS12
認証番号: 22000BZX00149000

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。