



Regional
Anesthesia

Ultraline 360

ウルトラプレックス 360

スティムプレックスウルトラ 360

Single Shot Peripheral Nerve Block Needle

Ultra

よく見える針が 使いやすい針


Stimuplex Ultra 360



超音波ガイド対応加工



神経刺激対応加工

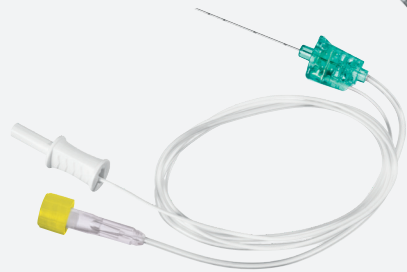


50cm薬液チューブ及び電極ケーブル付き

品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
4892503NR-01	スティムブレックスウルトラ 360 NRFit	0.71mm (22G)×35mm, 先端角30°	25本/箱	1箱
4892505NR-01	スティムブレックスウルトラ 360 NRFit	0.71mm (22G)×50mm, 先端角30°	25本/箱	1箱
4892508NR-01	スティムブレックスウルトラ 360 NRFit	0.71mm (22G)×80mm, 先端角30°	25本/箱	1箱
4892510NR-01	スティムブレックスウルトラ 360 NRFit	0.91mm (20G)×100mm, 先端角30°	25本/箱	1箱
4892515NR-01	スティムブレックスウルトラ 360 NRFit	0.91mm (20G)×150mm, 先端角30°	25本/箱	1箱

Ultraplex 360



超音波ガイド対応加工

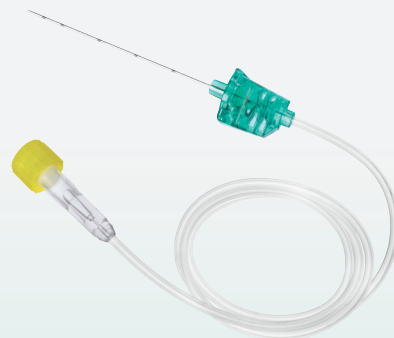

50cm薬液チューブ付き

品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
4892603NR-01	ウルトラブレックス 360 NRFit	0.71mm (22G)×35mm, 先端角30°	25本/箱	1箱
4892605NR-01	ウルトラブレックス 360 NRFit	0.71mm (22G)×50mm, 先端角30°	25本/箱	1箱
4892608NR-01	ウルトラブレックス 360 NRFit	0.71mm (22G)×80mm, 先端角30°	25本/箱	1箱
4892610NR-01	ウルトラブレックス 360 NRFit	0.91mm (20G)×100mm, 先端角30°	25本/箱	1箱
4892615NR-01	ウルトラブレックス 360 NRFit	0.91mm (20G)×150mm, 先端角30°	25本/箱	1箱

The neXt Generation for Ultrasound Conditions

Line360 Ultraplex 360 Stimuplex Ultra 360

■ Xmarking

針先端約2cmに渡り、全周360°にXの刻印を施しており、様々な角度からの超音波ビームに対して明瞭な反射性を持たせました。

角度をつけた穿刺においても超音波下で刻印部の視認性を実現しました。

■ 30° Dull Bebel

Tipのベベルは30°の鈍先となっており不意の神経血管や軟部組織の損傷を抑えます。

■ Safety Pattern


Tipより刻印部をSHORT/SHORT/LONGとする事でTipの位置を識別する事が可能となっています。

■ Multiple choice


多様化する超音波ガイド下末梢神経ブロック手技に対応出来るように電気刺激用の電極ケーブルの有無の選択が可能です。

針長は電極ケーブル有無にかかわらず35mm～150mmをご用意しております。

360° Xmarking

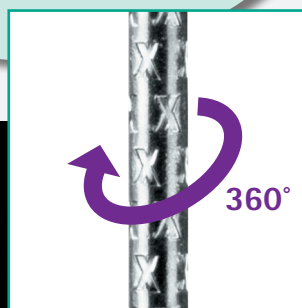

超音波を反射

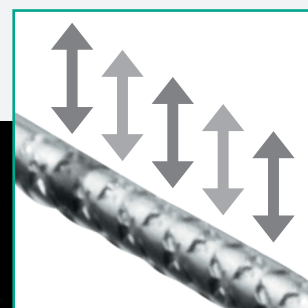

LONG

SHORT

SHORT

Tip



神経刺激装置



品番	製品名	製品仕様	包装・販売単位
4892098	スティムブレックスHNS12	SENSe機能付 9V電源仕様 接続ケーブル・試験用抵抗器付	1台
4892099	マッピング用電極ペン	スティムブレックス専用体表面 マッピング用電極ペン (オプション品)	1本
4892095	スティムブレックス 専用ケース	スティムブレックスHNS12 専用ケース補充用	1個
4892096	スティムブレックス用 試験用抵抗機器	スティムブレックスHNS12専用 試験用抵抗機器補充用	1個
4892070	スティムブレックスHNS12 専用接続ケーブル	接続ケーブル	1本

製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター

TEL 0120-401-741 (フリーダイヤル)

www.bbraun.jp

販売名:ウルトラブレックス 360
承認番号: 23000BZX00122000
販売名:スティムブレックスウルトラ 360
承認番号: 23000BZX00260000
販売名:スティムブレックスHNS12
認証番号: 22000BZX00149000

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。